



**SOL-MILLENNIUM**<sup>®</sup>  
Building a Healthier Tomorrow

**CATÁLOGO DE PRODUTOS**



A SOL-MILLENNIUM™  
**É UMA EMPRESA DEDICADA AO DESENVOLVIMENTO  
DE PRODUTOS QUE GARANTEM UM AMANHÃ MAIS  
SAUDÁVEL E SEGURO.**

A SOL-Millennium™ é uma empresa com presença global, especializada no desenvolvimento de dispositivos médicos inovadores que garantem a segurança dos profissionais da saúde e pacientes, bem como outros profissionais da área que participam diretamente dos processos que envolvem produtos com risco de acidentes com perfurocortantes.

Estamos continuamente compartilhando nossas ideias e conhecimento com os profissionais que atuam em locais com maiores riscos e incidências de acidentes com perfurocortantes, tais como: enfermeiros, auxiliares e médicos, pois acreditamos que são fundamentais para que nossos produtos sejam desenvolvidos por nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento com a qualidade e segurança necessária. A cultura da SOL-Millennium™ centra-se em melhorias contínuas, inovações tecnológicas e serviços aos clientes.

# A SOL-M™ É PIONEIRA MUNDIAL

NO DESENVOLVIMENTO DE SERINGAS E DISPOSITIVOS MÉDICOS DE SEGURANÇA



# SUMÁRIO



Diabetes Care

SOL-CARE™ SERINGA DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA INSULINA COM AGULHA FIXA

1

SOL-M™ SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA FIXA

2

SOL-M™ AGULHA PARA CANETA DE INSULINA

3



Injeção

SOL-CARE™ SERINGA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL

4



Agulha

SOL-CARE™ AGULHA DE SEGURANÇA

5



Preparação de Medicamentos

SOL-M™ AGULHA PARA ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA SEM FILTRO

6



Coleta de Sangue

SOL-CARE™ AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

7

SOL-M™ AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO

8

SOL-CARE™ ESCALPE DE SEGURANÇA PARA COLETA DE SANGUE COM ADAPTADOR

9

SOL-CARE™ ESCALPE DE SEGURANÇA PARA COLETA DE SANGUE

10

SOL-M™ HOLDER LUER LOCK ADAPTER

11

SOL-CARE™ COLETOR DE SANGUE COM AGULHA

12

SOL-CARE™

# SERINGA DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA INSULINA COM AGULHA FIXA




Os produtos Diabetes Care são desenvolvidos para prevenção de acidentes com agulhas. Além de diminuir a perda e o erro na dosagem na administração de medicamentos, conforme recomendação das Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Promove conforto para o paciente com seu bisel trifacetado, agulha fina e lubrificada. As seringas SOL-Millennium™ são látex free e não possuem espaço morto. Tecnologia e segurança em um único produto. Escala nítida e cilindro transparente. Seringa graduada em unidades de insulina e ml, também podendo ser utilizada para vacinação.

COD	DESCRIÇÃO	TAMANHO UNID.	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
100089IMB	Seringa para Insulina com Agulha Fixa - 8 x 0,33	0.5 ml	2400	100
110102020025	Seringa para Insulina com Agulha Fixa - 6 x 0,25	1 ml	2400	100
100020IMB	Seringa para Insulina com Agulha Fixa - 8 x 0,33	1 ml	2400	100
100081IMB	Seringa para Insulina com Agulha Fixa - 13 x 0,33	1 ml	2400	100

BE  
NEFÍ  
CIOS

**Dispositivo de retração:** agulha contaminada sai do tecido do paciente para dentro do cilindro da seringa.  
**Projetado para sua SEGURANÇA:** as mãos permanecem sempre atrás da agulha contaminada durante a injeção e ativação do dispositivo de segurança.  
**Design NO GAP:** permite manipular o êmbolo até a marca zero sem acionar o dispositivo de segurança.  
**Escala nítida:** escala de 1 em 1UI . Facilita a aspiração e precisão nas doses.  
**Anel de retenção:** evita a retirada do êmbolo e vazamento da medicação.  
**Sustentabilidade:** após o uso o êmbolo é quebrado, diminuindo o resíduo no coletor do perfurocortante, reduzindo os custos do descarte e impossibilitando o reuso.

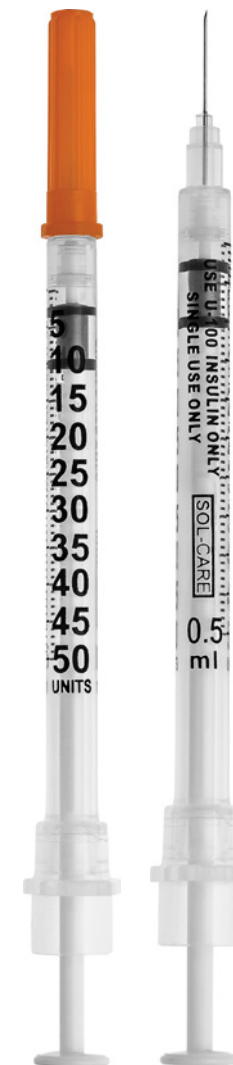

SOL-M™

# SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA FIXA



As injeções subcutâneas são feitas na primeira camada abaixo da pele, onde fica o tecido adiposo. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, seringas com agulha fixa não têm espaço residual. É possível, ainda, associar dois tipos de insulina na mesma seringa, algo comum na prática clínica. As agulhas são finas, com 6, 8 ou 13 mm de comprimento. Agulhas de menor comprimento são mais seguras, mais toleradas e confortáveis. O risco da insulina ser depositada no músculo, e não no tecido subcutâneo, aumenta progressivamente conforme o comprimento da agulha utilizada.

	COD	DESCRIÇÃO	TAMANHO UNID.	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. POR EMBALAGEM
EMBALAGEM BLISTER	110102010050	Seringa de insulina 0,5ml	SOL-M com agulha fixa 31G * 6mm x 0,25mm	2400	100
	110102010054	Seringa de insulina 0,5ml	SOL-M com agulha fixa 30G * 8mm x 0,3mm	2400	100
	110102010055	Seringa de insulina 1ml	SOL-M com agulha fixa 30G * 8mm x 0,3mm	2400	100
	110102010056	Seringa de insulina 1ml	SOL-M com agulha fixa 30G x 1/2 * 13mm x 0,3mm	2400	100
EMBALAGEM BAG	110102010048	Seringa de insulina 0,5ml	SOL-M com agulha fixa 31G * 6mm x 0,25mm	2400	10
	110102010049	Seringa de insulina 0,5ml	SOL-M com agulha fixa 30G * 8mm x 0,3mm	2400	10
	110102010052	Seringa de insulina 1ml	SOL-M com agulha fixa 30G * 8mm x 0,3mm	2400	10

BE  
NEFÍ  
CIOS

**Escala nítida:** 1 em 1 unidade, facilitando a aspiração de mini doses.

**Ótima lubrificação do êmbolo:** facilita a aspiração e ajuste da dose.

**Cilindro da seringa transparente:** permite visualização da integridade do medicamento aspirado.

**Anel de Retenção:** evita vazamentos e desperdício de medicações.

**Economia:** comparada à uma seringa comum de 1ml, a Seringa de Insulina Sol-M economiza mais de 0,06 ml por injeção.

**Sem espaço morto:** evita perda de medicamento.



SOL-M™

# AGULHA PARA CANETA DE INSULINA



Agulha feita para aplicação de insulina com caneta injetora para pacientes adultos e pediátricos. A caneta para aplicação de Insulina tem se tornado uma opção popular nos últimos anos. Entre suas vantagens em relação a seringa, estão: apresentação, praticidade no manuseio/transporte e opção de agulhas mais curtas e finas. Esses benefícios proporcionam melhor adesão ao tratamento, melhorando consequentemente o controle glicêmico.

COD	DESCRIÇÃO	TAMANHO UNID.	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
N42007B	Agulha de insulina para caneta SOL-M™	4mm x 0,23mm	1200	100
N42004B	Agulha de insulina para caneta SOL-M™	5mm x 0,25mm	1200	100
N42003B	Agulha de insulina para caneta SOL-M™	8mm x 0,25mm	1200	100

BE  
NEFÍ  
CIOS

**Design moderno:** agulha pequena, ultrafina em aço inoxidável com bisel trifacetado.  
**Tecnologia:** parede fina, permite maior fluxo de medicação.  
**Conforto:** agulha lubrificada, garante o bem-estar do paciente na hora da aplicação.  
**Compatibilidade:** todas as canetas de insulina do mercado.  
**Proteção:** interna e externa de agulha, com lacre na base do cone.  
**Fácil identificação do calibre:** proteção interna possui a cor do calibre da agulha.





SOL-CARE™

# SERINGA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL



A SOL-Millennium™ apresenta a seringa com dispositivo de segurança retrátil Sol-Care NO GAP com conexão Luer Lock. Este produto foi desenvolvido com um recurso de segurança integrado, que retrai a agulha para o interior do cilindro da seringa, eliminando os acidentes com agulhas. O êmbolo é quebrado após o uso, impossibilitando a reutilização da seringa. Além disso, oferece maior segurança, já que a agulha contaminada sai protegida diretamente do tecido do paciente para dentro do cilindro da seringa, evitando qualquer contato com perfurocortante contaminado. As seringas SOL-Millennium™ possuem conexão universal para todas as agulhas, são látex free e não possuem espaço morto.

COD	DESCRIÇÃO	TAMANHO UNID.	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
120006IMB	Seringa de segurança retrátil NO GAP	3 ml	1800	100
120007IMB	Seringa de segurança retrátil NO GAP	5 ml	1200	100
120008IMB	Seringa de segurança retrátil NO GAP	10 ml	900	100
120009IMB	Seringa de segurança retrátil NO GAP	20 ml	600	50

BE  
NEFÍ  
CIOS

**Dispositivo de retração:** agulha contaminada sai de dentro do tecido do paciente para o interior do cilindro da seringa.

**Projetado para sua segurança:** as mãos permanecem sempre atrás da agulha contaminada durante a injeção e ativação do dispositivo de segurança.

**Sinal de ativação:** confirmação visual e audível da ativação do sistema de segurança.

**Design No Gap:** permite manipular o êmbolo até a marca zero sem acionar o dispositivo de segurança.

**Anel de retenção:** evita a retirada do êmbolo, vazamento da medicação e exposição a fluidos.

**Mudança mínima da técnica:** permite injeções de ângulo baixo.

**Conforto e segurança para o Paciente:** cilindro da seringa totalmente cristalino, escala em negrito e retração manual sob controle, sem dor.

**Sustentabilidade:** após o uso o êmbolo é quebrado, diminuindo o resíduo no coletor do perfurocortante e os custos do descarte impossibilitando o reuso.





SOL-CARE™

# AGULHA DE SEGURANÇA



A linha de injeções da SOL-Millennium™ leva ao profissional da saúde o conforto e segurança necessário para trabalhar em todas situações do dia a dia. Os produtos são desenvolvidos com a mais alta tecnologia, para facilitar o uso e prevenir acidentes. O dispositivo de segurança é compatível com o tamanho da agulha e possui o padrão universal de cores no dispositivo: Segurança para o paciente e profissional.

COD	DESCRIÇÃO	TAMANHO UNID.	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
SNB2612	Agulha de segurança	13 x 0,45	800	100
SNB2210	Agulha de segurança	25 x 0,7	800	100
SNB2110	Agulha de segurança	25 x 0,8	800	100
SNB22125	Agulha de segurança	30 x 0,7	800	100
SNB21125	Agulha de segurança	30 x 0,8	800	100
SNB1815	Agulha de segurança	40 x 1,2	800	100

BE  
NEFÍ  
CIOS


**Dispositivo de segurança integrado ao canhão da agulha:** peça única, sem risco de desconexão e perda de medicação no circuito do dispositivo.

**Padrão Universal de Cores:** cor do dispositivo de segurança corresponde com a cor do calibre da agulha.

**Trava Dupla:** possui duas travas de segurança uma na base e outra no interior do dispositivo.

**Bisel da agulha:** bisel direcionado para cima, otimiza o tempo do profissional e reduz o risco de aplicações errôneas.

**Conforto para o paciente:** Agulha lubrificada, facilita o deslize no tecido do paciente.

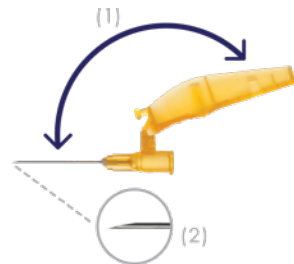

• **Angulação aproximada de 170° na abertura do dispositivo de segurança;**

• **A capa protetora não oculta a visualização do local da injeção.**



SOL-M™

# AGULHA PARA ASPIRAÇÃO PONTA ROMBA



Agulha para aspiração 25 x 1,2 mm e 40 x 1,2 mm, descartável, com ótimo fluxo, cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel simples e ponta romba / sem corte, seguindo o padrão universal de cores rosa. Conexão perfeita em seringa Luer Lock e Luer Slip, com protetor em polipropileno de encaixe firme. Para utilização na aspiração, diluição e reconstituição de medicamentos.

COD	DESCRIÇÃO	TAMANHO UNID.	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
110022B	Agulha para aspiração ponta romba sem filtro	40 x 1,2 mm	1000	100
110021B	Agulha para aspiração ponta romba sem filtro	25 x 1,2 mm	1000	100

BE  
NEFÍ  
CIOS

**Segurança:** aspiração e reconstituição de medicação.  
**Ideal para:** perfuração do frasco ampola e limpeza de ferimentos com curativos.  
**Reduz o risco:** de acidentes com perfurocortantes.  
**Fácil visualização do calibre:** capa protetora na cor rosa.  
**Minimiza:** a utilização desnecessária de material perfurocortante.  
**Encaixe universal:** seringas com bico Luer Slip e Luer Lock.  
**Ponta romba:** com cânula siliconizada.  
**Tamanho ideal:** 40 x 1,2 mm facilitando a manipulação e aspiração sem mudança da técnica.  
**NR32:** reduz o risco de acidentes com perfurocortantes.



SOL-CARE™

# AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA



A agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo com dispositivo de segurança SOL-CARE™ é um produto projetado para a segurança na coleta de sangue venoso de múltiplas amostras. O dispositivo foi projetado com um mecanismo de segurança que cobre a agulha após o uso. Na posição ativada, a tampa da agulha protege os profissionais contra acidentes durante o manuseio e após o descarte.

COD	DESCRIÇÃO	TAMANHO UNID.	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
SMSN21125B	Agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo	32mm x 0.8mm	480	48

BE  
NEFÍ  
CIOS

**Embalagem:** individual em cápsulas hermeticamente fechadas e esterilizadas com Óxido de Etileno.

**Lacre de Segurança contendo informações:** calibre da agulha, lote, validade e fabricante.

**Rosca dupla:** tipo universal com perfeito ajuste a adaptador/holder evitando desencaixe e vazamento.

**Conforto para o paciente:** agulha com aço inoxidável, bisel trifacetado e lubrificada, facilitando o deslize no tecido do paciente.

**Dispositivo de segurança integrado ao canhão da agulha:** peça única, sem desconexão e após acionamento impossibilita a reutilização da agulha.

**Trava tripla:** possui três travas de segurança, duas na base e outra no interior do dispositivo.

**Dois opções para ativação do dispositivo de segurança:** em uma superfície rígida ou com o polegar.

**Bisel da Agulha:** Direcionado para cima, otimiza o tempo do profissional na venopunção, reduz o risco de transfixar a veia e perda do acesso.

**Manguito de Borracha:** recobre totalmente a agulha distal, permitindo a coleta de diversas amostras sem vazamento de sangue dentro do adaptador entre a troca de tubos.

**Padrão Universal de Cores:** Cor do dispositivo de segurança corresponde a cor do calibre da agulha.



SOL-M™

# AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO



A coleta a vácuo é uma recomendação internacional adotada em todo o mundo. Este sistema de coleta é composto por um dispositivo que permite a aspiração do sangue através do vácuo, que se conecta diretamente ao tubo de análise. Ao puncionar a veia do paciente o sangue flui continuamente para o tubo de coleta a vácuo, sendo que o tubo já está preparado para o recebimento da quantidade específica de sangue e com os anticoagulantes necessários. Este sistema proporciona maior segurança ao profissional que realiza a coleta, pois o mesmo não entra em contato com o sangue coletado e exclui a necessidade de transferir a amostra da seringa para o tubo. Assim diminuindo a manipulação e o risco de alteração do resultado.

COD	DESCRIÇÃO	TAMANHO UNID.	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
MSN2110B	Agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo	25mm X 8mm 21G X1	1000	100

BE  
NEFÍ  
CIOS

**Utilização:** em coletas múltiplas de sangue venoso.

**Bisel da Agulha:** direcionado para cima, através de um indicador preto, otimizando o tempo do profissional na venopunção e reduzindo o risco de transfixar a veia e perda do acesso.

**Padrão Universal de Cores:** cor da capa protetora correspondente a cor do calibre da agulha.

**Manguito de Borracha:** recobre totalmente a agulha distal permitindo a coleta sem vazamento de sangue dentro do adaptador entre a troca de tubos.

**Embalagem:** agulhas embaladas individualmente em cápsulas hermeticamente fechadas e esterilizadas com Óxido de Etileno.

**Lacre de segurança contendo informações:** calibre da agulha, lote, validade e fabricante.

**Rosca dupla:** tipo universal com perfeito ajuste ao adaptador/holder evitando desengate e vazamento da amostra.

**Conforto para o paciente:** agulha com aço inoxidável, bisel trifacetado e lubrificada, facilitando o deslize no tecido do paciente.



SOL-CARE™

## ESCALPE DE SEGURANÇA PARA COLETA DE SANGUE COM ADAPTADOR



SOL-CARE™ Escalpe para coleta de sangue com dispositivo de segurança. O mecanismo de segurança deve ser acionado imediatamente após a coleta de sangue, protegendo o perfurocortante contaminado. O design do dispositivo de sangue transparente permite a visualização rápida do refluxo da primeira gota de sangue, confirmando a venopunção e diminuindo a manipulação do acesso. Acompanha adaptador/holder de uso único, sendo conjunto estéril em uma única embalagem.



Recomendação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica: DEHP Free.

COD	DESCRIÇÃO	TAM. E COMPR. DO TUBO VINÍLICO	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
110201030018	Escalpe de segurança para coleta de sangue	21G x 7"	200 unidades	25 unidades
110201030022	Escalpe de segurança para coleta de sangue	23G x 7"	200 unidades	25 unidades
110201030026	Escalpe de segurança para coleta de sangue	25G x 7"	200 unidades	25 unidades

BE  
NEFÍ  
CIOS

**Design moderno e de fácil manuseio:** o dispositivo de segurança é acionado através de um único movimento retilíneo.

**Dispositivo de segurança:** possui ranhuras na sua base. Mais segurança e conforto no acionamento.

**Visualização rápida:** dispositivo de segurança transparente permite a visualização rápida do refluxo de sangue, confirmando a venopunção e diminuindo a manipulação.

**Conforto para o paciente:** agulha com bisel trifacetado e lubrificada.

**Conexão a vácuo:** agulha distal para coletas múltiplas de sangue.

**Adaptador:** escalpe e holder em única embalagem estéril. Segurança para o paciente e rapidez/agilidade para o profissional.

**Latex Free:** segurança para pacientes alérgicos a látex.

**Infusão:** permite infusões de curta duração.



SOL-CARE™

## ESCALPE DE SEGURANÇA PARA COLETA DE SANGUE



O SOL-CARE™ Escalpe de Segurança para coleta de sangue é um dispositivo de engenharia de segurança destinado à coleta de sangue venoso. É indicado para coletas de múltiplas amostras em pacientes pediátricos, geriátricos, quimioterápicos, curvas glicêmicas e pacientes que apresentam acesso venoso difícil. O mecanismo de segurança pode ser ativado imediatamente após a coleta de sangue, ajudando a proteger o profissional flebotomista contra acidentes com agulha.



Recomendação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica: DEHP Free.

COD	DESCRIÇÃO	TAM. E COMPR. DO TUBO VINÍLICO	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
00000	Escalpe de segurança para coleta de sangue	21G x 7"	200 unidades	25 unidades
00000	Escalpe de segurança para coleta de sangue	23G x 7"	200 unidades	25 unidades
00000	Escalpe de segurança para coleta de sangue	25G x 7"	200 unidades	25 unidades

BE  
NEFÍ  
CIOS

**Design moderno e fácil manuseio:** o dispositivo de segurança é acionado através de um único movimento retilíneo. transparente permite a visualização do refluxo sanguíneo imediatamente.

**Dispositivo de segurança:** possui ranhuras na sua base, mais segurança e conforto no acionamento.

**Visualização rápida:** dispositivo de segurança transparente permite a visualização rápida do refluxo de sangue, confirmando a venopunção e diminuindo a manipulação.

**Conforto para o paciente:** agulha com bisel trifacetado e lubrificada.

**Conexão a vácuo:** agulha distal para coletas múltiplas de sangue.

**Látex Free:** segurança para pacientes alérgicos a látex.

**Infusão:** permite infusões de curta duração.



SOL-M™

## HOLDER LUER LOCK ADAPTER



O dispositivo de acesso Holder Luer Lock Adapter SOL-M™ fornece amostras estéreis, seguras e protegidas para resultados rápidos, precisos e consistentes que podem levar a melhores resultados ao paciente. Ele oferece a segurança de uma conexão luer lock com trava e rosca dupla, substituindo um dispositivo luer slip. É livre de látex e compatível com uma conexão luer fêmea ou um local IV sem agulha, projetado para acesso ao bloqueio luer.

COD	DESCRIÇÃO	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
000000	Holder Luer Lock Adapter	00000	00000

BE  
NEFÍ  
CIOS

**Vantagem:** diminui o número de punção venosa desnecessária, reduzindo o trauma do paciente e aumentando seu conforto durante a coleta.

**Compatível:** conexão luer fêmea ou acesso IV.

**Segurança:** dispensa o uso de agulha, eliminando os acidentes com perfurocortantes.

**Higiene:** produto estéril, descartável e de uso único, elimina reutilização e risco biológico;

**Garantia da qualidade:** coleta por sistema fechado.

**Manguito de Borracha:** de excelente qualidade que permite a coleta de diversas amostras sem vazamento de sangue dentro do adaptador entre a troca de tubos.

**Látex Free:** segurança para pacientes alérgicos a látex.

**Suporte/Holder:** antiderrapante para tubo de coleta.

**Design:** moderno, de fácil manuseio.

**Conexão a vácuo:** agulha distal para coletas múltiplas de sangue.

**Produto totalmente cristalino:** permite a visualização do refluxo sanguíneo imediatamente.





SOL-CARE™

## COLETOR DE SANGUE COM AGULHA



Dispositivo de segurança para coleta de sangue a vácuo, composto por três partes: agulha, adaptador/holder e tubo a vácuo que retrai a agulha para seu interior, impossibilitando o reuso. Seguindo o regulamento da Occupational Safety and Health Administration OSHA, que protege as duas extremidades da agulha, eliminando o risco de respingos e contaminação cruzada. Produto principalmente indicado para uso em áreas de risco como: HIV, HEPATITE e demais doenças infectocontagiosas.

COD	DESCRIÇÃO	TAMANHO UNID.	UNID. P/ CAIXA DE EMBARQUE	UNID. P/ CAIXA
B7001BCD	Coletor de sangue	Único	50	400

BE  
NEFÍ  
CIOS

**Dispositivo de segurança a vácuo:** agulha retrai automaticamente da veia do paciente para o interior do dispositivo de segurança a vácuo através do tubo de ativação.

**Conforto para o paciente:** retração da agulha de forma suave e contínua.

**Praticidade na punção:** o design no dispositivo de segurança não obstrui a visão no momento da venopunção.


**Norma NR 32:** agulha da coleta de sangue fica encapsulada no sistema após ativação.

**Ativação:** elimina a exposição de ambas as extremidades da agulha contaminada, reduzindo o risco de ferimento por agulha.

**Permite:** que o flebotomista mantenha as duas mãos atrás da agulha contaminada ao ativar o dispositivo automático de retração da agulha.

**Adaptador:** agulha múltipla para coleta e holder em única embalagem estéril. Segurança para o paciente e rapidez/agilidade para o profissional.



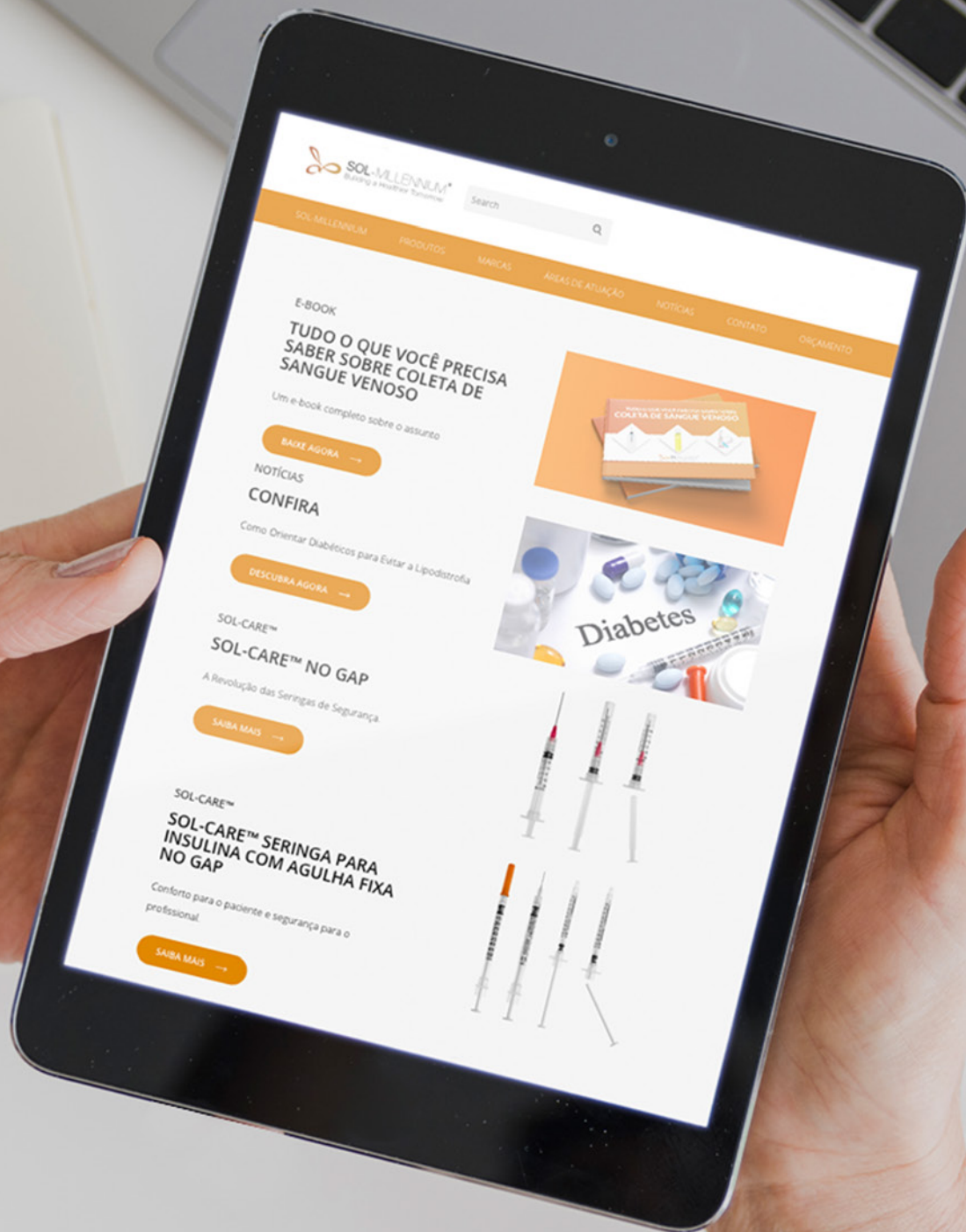

RECEBA AS  
**NOVIDADES DA SOL**  
NO SEU E-MAIL

ACESSE O NOSSO SITE E FAÇA SEU CADASTRO!



BAIXE NOSSOS E-BOOKS  
**GRATUITAMENTE NO NOSSO SITE!**



## UM PORTFÓLIO COMPLETO para sua segurança

Oferecemos um portfólio de produtos com reconhecimento global, que estão disponíveis através de uma completa rede de distribuição mundial e efetuamos treinamentos a todos os clientes e parceiros conforme recomenda a norma NR-32.



**SOL-MILLENNIUM**<sup>®</sup>  
Building a Healthier Tomorrow

### Entre em contato e saiba mais!

#### São Paulo

Rua Alvorada, 1289  
Cj.1004/1005 - Vila Olímpia  
11. 3044 1183

#### Ribeirão Preto

Rua Raphael Andreolli, 850  
Distrito Empresarial Pref. Luiz Roberto Jabali  
16. 3442 1454

[sol-m.com.br](http://sol-m.com.br)

